



STRATOS MASK

HYGIENISCHE MASKE ZUM ALLGEMEINEN
SCHUTZ FÜR DEN ALLTAGSGEBRAUCH





STRATOS MASK

STRATOS MASK IST DIE HYGIENISCHE MASKE ZUM ALLGEMEINEN SCHUTZ, DIE VON LA SPORTIVA FÜR DEN ALLTAGSGEBRAUCH IN DER PHASE II DER CORONA-KRISE ENTWICKELT WURDE.

Um die Verbreitung des COVID-19 so weit wie möglich einzudämmen, müssen wir alle eine Mundschutzmaske tragen, um eine ungewollte Ansteckung unserer Mitmenschen zu vermeiden.

Die Stratos Mask umhüllt das Gesicht ergonomisch und vermeidet so den Ausstoß von Speicheltröpfchen, die das Virus enthalten könnten.

CARATTERISTICHE

TECNICHE

Stratos Mask ist die hygienische Mundschutz-Maske für den privaten Gebrauch aus 3D-Mesh-Gewebe mit einem inneren zertifizierten, austauschbaren Bakterien-Filter. Die Maske ist waschbar, wiederverwendbar und dank einer perfekten Ergonomie, die das Gesicht sicher und bequem umhüllt, angenehm zu tragen.

La Sportiva bietet die **Stratos Mask** für den täglichen Gebrauch an, dank dem hohen Tragekomfort und dem einfach austauschbaren Filter.

- 1 **Ergonomische** und umhüllende Form.
- 2 **3D-Mesh-Gewebe** für hohe Atmungsfähigkeit und mit ViralOff by Polygiene-Behandlung gegen Viren und Bakterien.
- 3 **Flexible Struktur** für maximalen Tragekomfort und Atmungsfähigkeit.
- 4 **Sensitive Comfort Layer™**: ginnere Lycra®-Einsätze auf Nase und Kinn für maximalen Tragekomfort.
- 5 **Einstellbare elastische Bänder** für präzisen und sicheren Sitz.
- 6 **Innenfilter** aus zertifiziertem Melt Blown-Polypropylen für die Bakterienfiltration, einfach austauschbar.
- 7 **Loch** für die korrekte Überprüfung der Filterbaugruppe.



20




S (kid) / M / L



Achtung: Trotz der den Normen entsprechenden Filter ist die Stratos Mask nicht als medizinische Maske zu sehen.



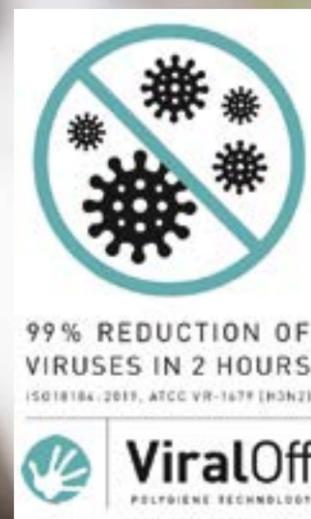

ViralOff by Polygene-Behandlung gegen Viren und Bakterien

Alle anderen Bestandteile der Maske sind mit **ViralOff by Polygene**-Behandlung ausgestattet, die 99% der Viren und Bakterien in weniger als zwei Stunden tötet (ISO 18184:2019). Somit ist die Maske immer sauber, wenn man sie anlegt. Dank der ViralOff-Behandlung ist es nicht nötig, die Maske nach jedem Gebrauch zu waschen.



Austauschbarer Filter aus Polypropylen

Innerhalb der Stratos Mask befindet sich ein zertifizierter, einlagiger Bakterien-Filter, der dank der praktischen Straps einfach ausgetauscht werden kann. Der Filter ermöglicht es, **99% der aus dem Mund ausgestoßenen Bakterien und Viren zu filtern**, so wie es für die chirurgischen Masken gemäß der EN ISO 14683:2019 Norm vorgesehen ist.



Wann wird der Filter ausgetauscht?

Der Filter soll am besten täglich ausgetauscht werden, noch öfter bei intensivem Gebrauch, wie nach dem Sport oder nach mehrstündigem Gebrauch in der Arbeit. Bei intensivem Gebrauch empfiehlt La Sportiva den Austausch ca. alle vier Stunden. Die Maske ist ein dauerhaftes Produkt und kann öfter gewaschen werden. Es muss beachtet werden, dass die antibakterielle Behandlung „ViralOff“ infolge der normalen Abnutzung des Materials nach dem Waschen mit der Zeit progressiv nachlassen wird.



Achtung: Es wird empfohlen, vor dem Anlegen und Abnehmen der Maske immer die Hände zu waschen.





MATERIALEIGENSCHAFTEN



HYGIENISCH

Das 3D-Mesh-Gewebe wird in Europa.
Ein hygienisches und antiallergisches Gewebe.



NACHHALTIG

Die Verwendung einer waschbaren und wiederverwendbaren Maske statt einer Einwegmaske trägt zum Umweltschutz bei. Die Fläche des Filters ist kleiner als jene, die zur Herstellung der medizinischen Masken notwendig ist. Somit wird die Verschwendung von Materialien zusätzlich eingeschränkt.



HALTBAR

das Gewebe ist abriebfest und haltbar,
auch nach mehrmaligem Waschen.



WASCHBAR

Nach Entfernung des Filters ist die Maske komplett waschbar, sie kann mit der Hand oder in der Waschmaschine bei 40° gewaschen werden.



ATMUNGSAKTIV

Das 3D-Mesh-Gewebe und die 3D-ergonomische Form machen das Produkt sehr atmungsaktiv.



KOMFORTABEL

Die inneren soft-touch Lycra®-Einsätze sorgen für maximalen Tragekomfort.



ANPASSBAR

Es ist möglich, die Ergonomie anzupassen, indem man die Kinnabdeckung anhebt und die Nasenabdeckung runterzieht, für eine bessere Atmungsfähigkeit .




BEHANDLUNG GEGEN VIREN

Das 3D-Mesh-Gewebe und die inneren Lycra®-Einsätze sind mit Polygiene-ViralOff-Behandlung gegen Viren und Bakterien ausgestattet.



PATENT PENDING

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

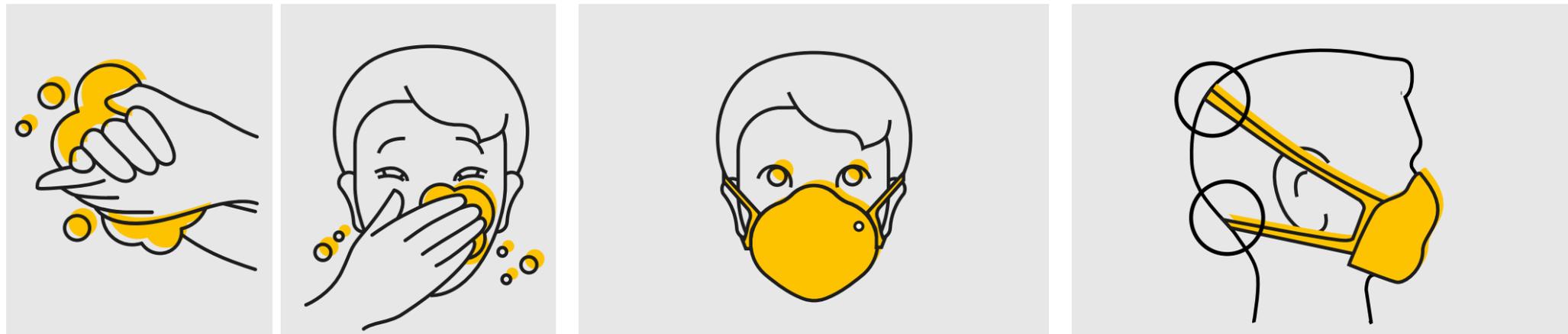


1 Waschen Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht, bevor Sie die Maske und den Filter anfassen und aufsetzen.

2 Leg die Maske auf das Gesicht und ziehe die Bänder hinter den Kopf.

3 Stell die Spannung der Bänder ein, sodass die Maske eng am Gesicht anliegt, ohne Leerräume.



ENTFERNUNG UND AUSTAUSCH DES FILTERS

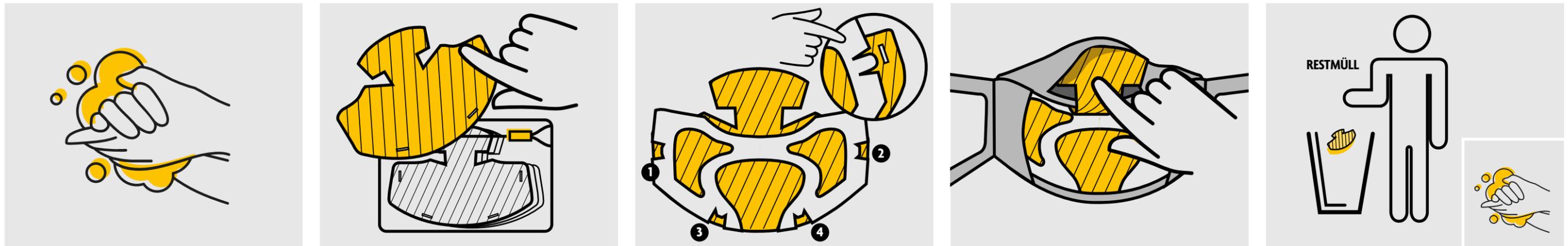

1 Wasch dir sorgfältig die Hände, bevor du den Filter aus der Verpackung nimmst.

2 Verschließe die Verpackung sofort, nachdem du einen der 30 Einwegfiltern herausgenommen hast.

3 Montieren Sie den Filter am Rahmen in der Abbildung gezeigten Reihenfolge.

4 Fügen Sie den Rahmen in die Maske ein. Filter fernhalten, in Kontakt mit der Maske.

5 Zum Entfernen gehe in umgekehrter Reihenfolge vor: Heb die Lasche an und entferne den Filter. **Entsorge den Filter über den Restmüll.**

Nach dem Vorgang sorgfältig die Hände waschen.

WASCHBAR UND WIEDERVERWENDBAR



Die STRATOS MASK kann mit der Hand oder in der Waschmaschine bei 40°C gewaschen werden, nachdem man den Filter und die elastischen Bänder entfernt hat. Da die Strato Mask waschbar ist, ist sie langlebig und trägt im Vergleich zur Einwegmaske zur Reduzierung des Abfalls bei. Trotzdem ist es ratsam, dass die Stratos Mask auch nach dem Waschen immer nur von der gleichen Person und nicht von anderen Menschen, auch nicht aus der Familie, verwendet wird.

Von einer chemischen Reinigung wird dringend abgeraten.



STRATOS MASK



LA SPORTIVA